



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig, weil sie Ihnen helfen wird, HYLO® FRESH richtig anzuwenden.

HYLO® FRESH

Natriumhyaluronat 0,3 mg/ml und Euphrasia-Urtinktur
Zur Linderung gereizter Augen
Sterile, phosphatfreie Lösung ohne Konservierungsmittel

Was ist HYLO® FRESH ?

HYLO® FRESH ist eine sterile, konservierungsmittelfreie Lösung mit 0,3 mg/ml Natriumhyaluronat, Euphrasia-Urtinktur, einem Boratpuffer und Wasser.

Wozu braucht man HYLO® FRESH*?

Zur Linderung gereizter Augen.

Wann sollte man HYLO® FRESH anwenden?

HYLO® FRESH wird zur Linderung gereizter Augen benutzt. Gereizte und trockene Augen können durch umgebungsbedingte Belastungen wie intensive Bildschirmarbeit, trockenes Raumklima, Zugluft, vermehrte Sonneneinstrahlung, Belastung der Luft mit Staub oder Pollen oder Kontaktlinsenträgern entstehen. Schon seit Jahrhunderten werden Zubereitungen aus Augentrost (*Euphrasia officinalis*) traditionell bei Bindehautreizungen mit geröteten und brennenden Augen, vermehrter Tränenabsonderung, Schwellungen und Rötungen der Augenlider oder der Lidränder angewandt. HYLO® FRESH enthält außerdem Natriumhyaluronat. Natriumhyaluronat erhöht die Viskosität der befeuchtenden Lösung und macht sie damit dickflüssiger als Wasser. Dadurch bleibt sie länger auf der Augenoberfläche haften. Durch die Anwendung der Augentropfen werden gereizte Augen und Augenlider beruhigt und erhalten eine tränenähnliche Befeuchtung. Sie behandeln alle Symptome, die durch eine Austrocknung der Augenoberfläche entstehen, z. B. weil nicht ausreichend natürliche Tränen vom Körper produziert werden. HYLO® FRESH dient der besseren Befeuchtung der Augen auch beim Tragen von Kontaktlinsen.

Aufgrund der Konservierungsmittelfreiheit wird HYLO® FRESH im Allgemeinen hervorragend vertragen. HYLO® FRESH ist darüber hinaus phosphatfrei, so dass mögliche Komplikationen durch die Bildung von Ablagerungen in der Hornhaut vermieden werden.

Wie wendet man HYLO® FRESH an?

Verwenden Sie HYLO® FRESH nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war (☉).

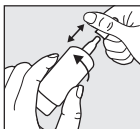


Bild 1:

Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen. Halten Sie dazu die Kappe knapp über der Flasche fest und ziehen Sie mit Ihrer anderen Hand die Flasche mit einer Drehbewegung von der Kappe weg.

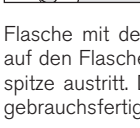


Bild 2:

Bitte vor der ersten Anwendung von HYLO® FRESH die Flasche mit der Tropferspitze senkrecht nach unten halten und so oft auf den Flaschenboden drücken, bis der erste Tropfen an der Flaschen spitze austritt. Danach ist die Flasche für die folgenden Anwendungen gebrauchsfertig.

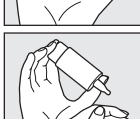


Bild 3:

Stützen Sie die Hand mit der COMOD®-Flasche wie dargestellt auf der freien Hand ab.



Bild 4:

Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie mit der freien Hand das Unterlid leicht vom Auge ab und drücken Sie schnell und kräftig in der Mitte auf den Flaschenboden. Dadurch wird der Mechanismus zur Entnahme eines Tropfens betätigt. Aufgrund der besonderen Ventiltechnik des COMOD®-Systems sind die Größe und Geschwindigkeit des Tropfens auch bei sehr kräftigem Druck auf den Flaschenboden immer gleich. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.

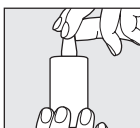


Bild 5:

Nach Gebrauch die Tropferspitze sofort sorgfältig mit der Kappe verschließen. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropferspitze trocken ist. Vermeiden Sie beim Tropfen einen Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut.

Der Flasche können 10 ml Lösung entnommen werden; dies entspricht etwa 300 Tropfen. Aus produktionstechnischen Gründen bleibt stets ein kleiner Flüssigkeitsrest in der Flasche zurück.

Die Dauer der Anwendung von HYLO® FRESH ist nicht beschränkt.

Mit dem Inhalt einer Flasche HYLO® FRESH sollte immer dieselbe Person behandelt werden.

Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Für den Fall einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Augentropfen sollte ein Anwendungsabstand von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. HYLO® FRESH sollte dann immer zuletzt verabreicht werden. Augensalben sollten in jedem Fall nach HYLO® FRESH in den Bindehautsack eingestrichen werden.

Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit sind HYLO® FRESH Augentropfen auch bei langdauernder Anwendung besonders gut verträglich. In sehr seltenen Einzelfällen wurde von Überempfindlichkeitsreaktionen (Brennen, Tränenfluss) berichtet, die nach Absetzen von HYLO® FRESH direkt abklingen.

Wir empfehlen nach dem Einsetzen von Kontaktlinsen mit der Anwendung der Augentropfen etwa 30 Minuten zu warten, um mögliche Unverträglichkeitsreaktionen zu vermeiden, die aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Kontaktlinsenpflegemitteln und HYLO® FRESH möglich sind.

HYLO® FRESH kann aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse auch bei Kindern, sowie von schwangeren und stillenden Frauen angewandt werden.

Wie oft und wie lange sollte man HYLO® FRESH anwenden?

HYLO® FRESH sollte individuell nach Ihrer Befindlichkeit dosiert werden. Im Allgemeinen tropfen Sie 3mal täglich 1 Tropfen HYLO® FRESH in den Bindehautsack jeden Auges. Bei stärkeren Beschwerden kann HYLO® FRESH öfters am Tag getropft werden. Sollten Sie HYLO® FRESH häufiger (z. B. mehr als 10mal täglich) anwenden, lassen Sie Ihre Augen von Ihrem Augenarzt untersuchen.

HYLO® FRESH ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie - wie bei allen Erkrankungen - bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

Wann sollte man HYLO® FRESH nicht anwenden?

HYLO® FRESH sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile angewendet werden.

Welche Hinweise zur Aufbewahrung von HYLO® FRESH sind zu beachten?

Nicht über 25 °C lagern.
Nach Anbruch einer Flasche ist HYLO® FRESH 6 Monate verwendbar.
Nach Ablauf des Verfalldatums (☞) nicht mehr anwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

10 ml Augentropfen

Stand der Information: Mai 2017

Hersteller (☛):

URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Deutschland

Vertrieb Deutschland:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken
Tel.: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88
E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Vertrieb Österreich:

URSAPHARM Ges.m.b.H., A-3400 Klosterneuburg
Tel.: +43 676/842 799 100, Fax: +43 125 330 339 113,
E-Mail: info@ursapharm.at



Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig! Wir freuen uns, per Post, Fax (Nr. +49 6805/9292-222) oder via www.ursapharm.info/hylofresh von Ihnen zu hören.





Instruction for use

Please read this information carefully because it will help you to use HYLO® FRESH properly.

HYLO® FRESH

Sodium hyaluronate 0.3 mg/ml and Euphrasia-original mother tincture
For relief of irritated eyes

Sterile, phosphate-free eye drops without preservatives

What is HYLO® FRESH?

HYLO® FRESH is a sterile preservative-free solution containing 0.3 mg/ml sodium hyaluronate, Euphrasia-original mother tincture, a borate buffer and water.

What is HYLO® FRESH used for?

For relief of irritated eyes.


When should HYLO® FRESH be used?

HYLO® FRESH is used for the relief of irritated eyes. Irritated and dry eyes can result from environmental stress such as intensive computer-based activity, dry climate, draught, increased solar radiation, air pollution caused by dust or pollen or wearing contact lenses. For hundreds of years, preparations of eyebright (*Euphrasia officinalis*) are traditionally used for the treatment of conjunctival irritation with red and burning eyes, increased secretion of tears, swelling and redness of eyelids or eyelid margins. Moreover, HYLO® FRESH contains sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate increases the viscosity of the moisturizing solution so that it becomes more viscous than water. Thus, it stays longer on the ocular surface. The application of the eye drops soothes irritated eyes and eyelids and provides a tear-like moistening. With it all symptoms are treated that are caused by drying of the surface of eye, e.g. because not enough natural tears are produced by the body. HYLO® FRESH is used for the moistening of the eyes even when wearing contact lenses.

Being preservative-free, HYLO® FRESH is very well tolerated. Moreover, HYLO® FRESH is phosphate-free, so that possible complications due to the formation of precipitations in the cornea are avoided.

How should HYLO® FRESH be applied?

Only use HYLO® FRESH if the sealing of the folding carton was intact before the first use (☺).

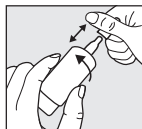

Step 1:

Remove cap before use.

For this purpose, hold the cap just over the bottle. With your other hand, pull away the bottle from the cap with a rotary movement.


Before the first application please turn the HYLO®

FRESH bottle with its tip down and press onto the bottom of the bottle until the first drop appears at the nozzle. Now the bottle is ready for further use.



Step 2:

Hold the bottle upside down with the thumb on the shoulder of the bottle and the other fingers on the bottom of the bottle.

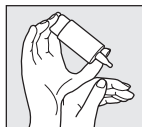


Step 3:

Support the hand holding the COMOD®-bottle as shown with the other hand.



Step 4:

Lean your head back slightly, gently pull down your lower eyelid and apply a strong and quick pressure on the middle of bottom of the bottle. This activates the mechanism for the release of one drop. Because of the special COMOD® valve system, size and speed of each drop are the same independently on how much pressure is applied. Slowly close your eyes to allow the fluid to spread evenly on the eye surface.

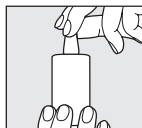

Step 5:

Replace cap immediately after use. Take care that the dropper tip is dry.

When applying the fluid please avoid any contact between the tip of the bottle and your eye or your skin.

The COMOD-bottle releases 10 ml of solution which is equivalent to approximately 300 drops. For technical reasons a small amount of solution remains in the bottle at the end of usage.

The duration of use of HYLO-FRESH is not limited.

Only one person should be treated with one particular bottle of HYLO® FRESH.

What else do you need to know?

If you use any other eye drop medication please allow at least 30 minutes between the applications. HYLO® FRESH should always be used last. Eye ointments should, however, always be administered after using HYLO® FRESH.

Because it is preservative-free, HYLO® FRESH eye drops is well tolerated even when used over extended periods of time. In very rare cases hypersensitive reactions like burning or excessive tearing were reported which stopped immediately when the use of HYLO® FRESH was discontinued.

To avoid incompatibility reactions that are possible due to interactions between contact lens care products and HYLO® FRESH, we recommend to wait for about 30 minutes after inserting contact lenses before the eye drops are applied.

According to existing knowledge HYLO® FRESH can be used in children, pregnant and breast-feeding women.

How often and for how long can you use HYLO® FRESH?

HYLO® FRESH should be used according to your condition. Generally you instil one drop of HYLO® FRESH three times a day into each eye. If necessary it can also be used more frequently. If you use HYLO® FRESH more frequently (e. g. more than 10 times per day) please consult your eye doctor. HYLO® FRESH is suitable for long-term treatment. Nevertheless, as with all complaints, you should consult your eye doctor when your complaints persist.

When should you not use HYLO® FRESH?

HYLO® FRESH should not be used if you are hypersensitive to one of the ingredients.

What you need to know about storing HYLO® FRESH?

Do not store above 25 °C.

HYLO® FRESH can be used for 6 months after opening.

Do not use beyond the expiry date (☞).

Keep out of the reach of children.

The following packaging sizes are available:

10 ml eye drops

Date of information: May 2017

Manufacturer (🇩🇪):

URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Germany

Distributed in Germany by:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, D-66129 Saarbrücken

Phone: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88

email: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Distributed in Austria by:

URSAPHARM Ges.m.b.H., A-3400 Klosterneuburg

Phone: +43 676/842 799 100, Fax: +43 125 330 339 113

email: info@ursapharm.at



Your opinion about our product is of great importance for us!
We would be pleased to receive your feedback via post, fax (no. +49 6805/9292-222)
or via www.ursapharm.info/hylofresh.