

# Askina® Transorbent® | Border | Sacrum

Die Schaumstoff-Wundauflage mit Hydrogel-Schicht und Fixierrand bei mäßiger Exsudation



CEPTON Studie im Auftrag BVMed


Moderne Wundversorgung steigert Heilungsraten und senkt Therapiekosten.

Durch den Einsatz moderner Produkte zur Wundbehandlung können der Bedarf an Verbandwechseln um ein Vielfaches reduziert, die Kosten der Therapie um 25% gesenkt und die Heilungsraten um über 130% gesteigert werden.

Askina® Transorbent® Border und Askina® Transorbent® Sacrum sind vom Aufbau identisch zu Askina® Transorbent®. Beide Wundauflagen sind jedoch zusätzlich mit einem umlaufenden 2 cm Fixierrand versehen.

Eine semipermeable Polyurethanfolie verhindert das Aufrollen und Ablösen der Wundauflage. Es wird eine optimale Anpassung und Haftung an schwierigen Körperstellen erzielt.

## Der Aufbau von Askina® Transorbent®

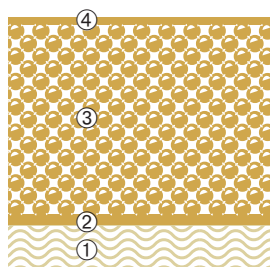

- 1. Schicht – Adhäsivschicht**  
Klebt nicht auf der Wunde
- 2. Schicht – Hydrogelschicht**  
Absorbiert Wundexsudat, gibt es in den Verband weiter; erhält ein feuchtes Wundmilieu
- 3. Schicht – Schaumstoffschicht**  
Fördert den Gasaustausch, leitet Wundexsudat zur Verdunstung weiter; polsternde Wirkung
- 4. Schicht – Semipermeable Polyurethanfolie**  
Durchlässig für Gase

## Einsatzgebiete

- › Dekubitus
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußulcus
- › Spalthautentnahmestellen
- › Traumatische Wunden



Askina® Transorbent®



Askina® Transorbent® Border



Askina® Transorbent® Sacrum



Askina® Transorbent®		Abmessung	VE	PZN	REF
<b>Border</b>	Größe ohne FR	5 cm x 10 cm	5 Stück	0045818	0072705 B
	Größe mit FR	9 cm x 14 cm			
	Größe ohne FR	10 cm x 10 cm	5 Stück	0045824	0072710 C
	Größe mit FR	14 cm x 14 cm			
	Größe ohne FR	13 cm x 13 cm	5 Stück	0045830	0072715 D
	Größe mit FR	17 cm x 17 cm			
	Größe ohne FR	20 cm x 20 cm	5 Stück	0045847	0072720 E
	Größe mit FR	24 cm x 24 cm			
<b>Sacrum</b>	Größe ohne FR	15 cm x 16,5 cm	5 Stück	8911698	0072792 X
	Größe mit FR	18 cm x 20 cm			

FR = Fixierrand (umlaufend ca. 2 cm)

Askina® Transorbent®				
Abmessung	VE	PZN	REF	
5 cm x 7 cm	10 Stück	4010751	0072786 R	
10 cm x 10 cm	5 Stück	7331183	0072789 U	
15 cm x 15 cm	5 Stück	7331208	0072790 V	
20 cm x 20 cm	5 Stück	7331214	0072791 W	